


# クリーンホットセル

型式:UG1500W2-01

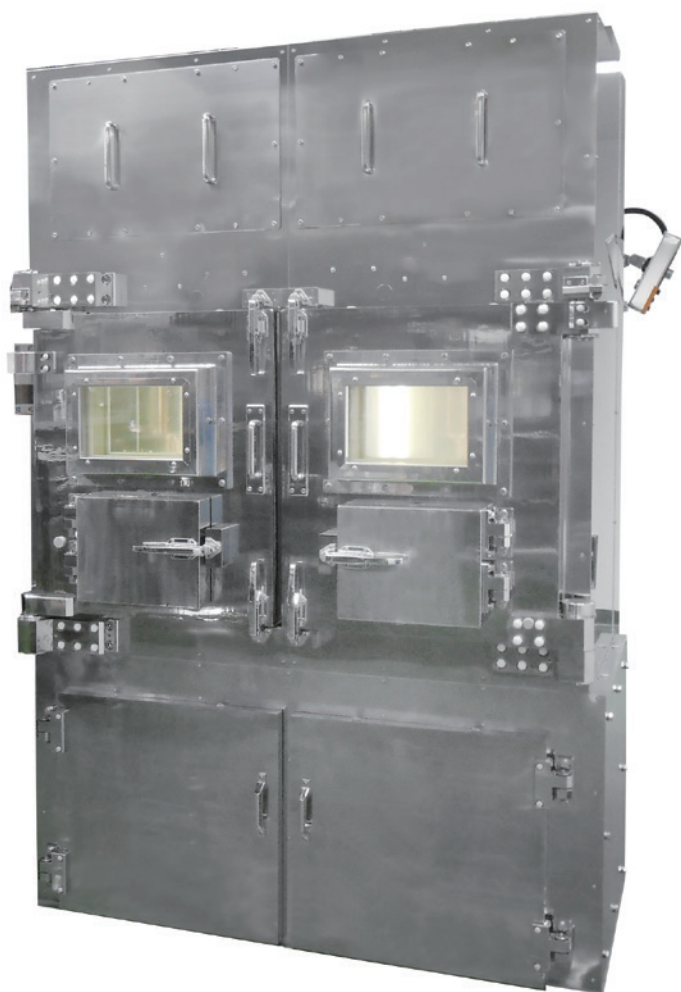

弊社クリーンホットセルは清浄度の高い無菌操作区域に設置するためのものです。

1セルに2台の合成装置を収納可能です。

## クリーンホットセルの機能と特徴

- クリーンベンチ及びクラスII安全キャビネット基準に準じた風速を確保しております(0.5m/S±30% Hepa下15cm)。
- セル内天井部のHepaの開口部が大きく垂直方向に均一な気流が保たれます。
- 清浄度はグレードCを標準としております。
- 給気は室内の空気を吸引します。
- 排気は施設の局所排気に接続して使用します。ホットセル内の空気がキャビネット外に吹き出さない仕様となります。
- 照明はセル内中央、底面より13cmで800Lx以上です。
- 装置外騒音は1m離れ、床面より1mで65db以下です。

## ■クリーンホットセル主仕様

鉛遮蔽	鉛厚 75mm (天面、床 50mm)
	鉛ガラス 320×220×240mm
寸法	外寸 幅1500×奥行1000×高さ2400mm
	内寸 (幅617×奥行600×高さ695mm) ×2
重量	約11000kg
電源	3相200V×5A
	単相100V×15A
外装	SUS304 外観面/#400磨き
内装	内部カメラ (オプション)
	スライドテーブル (オプション)

## クリーンホットセルの構造

- クリーンホットセルは合成装置用とし、バルク配管などを考慮した構造となっておりますが、詳細はオプションで変更可能です。
- セル内にはターゲット水回収装置を設置可能なスペースを確保しております。
- 本セル裏面には給気/排気用にリターンダクトを有しませず(セル寸法に含まず)。
- Hepaの交換は正面天井部より交換可能な構造としておりメンテナンスが容易です。

製造販売元

**UG** Technology and Laboratory  
株式会社 **ユニバーサル技研**

〒250-0002 神奈川県小田原市寿町3-1-7

TEL:0465-32-5005 / FAX:0465-32-5885

Mail:univer@maple.ocn.ne.jp http://www.universalgiken.jp/

代理店